

Sept. 2013

BRUGERVEJLEDNING TIL BANO-BADEVÆRELSE

Optimalt samspil mellem brugeren og plejeren



DESIGNED FOR CARE



Formålet med dette dokument er at give nogle generelle oplysninger om, hvordan man bruger et Bano-badeværelse. Dette skal være med til at give en indsigt i de forskellige alternativer man har. På denne måde sikrer man at badeværelset bruges optimalt af både plejere og brugere. Vores koncept indebærer en nøje gennemtænkt placering af de forskellige badeværelseselementer. Dette giver mange forskellige muligheder for brugeren, for at kunne klare sig selvstændigt, i så lang tid som muligt. Tanken er at der altid skal være et støttehåndtag inden for rækkevidde.



Menneskets naturlige bevægemønster danner udgangspunkt for konceptet, som er at skabe en funktionel badeværelsesindretning. Øget selvhjulpethed giver brugeren mere tryghed og selvtilid, som er med til at give øget livskvalitet.

ERGONOMI



Personalet skal kunne lære brugerne, hvordan de i størst mulig grad kan klare sig selv på badeværelset, ved at benytte de forskellige funktionsløsninger som Bano-konceptet giver. Dermed vil brugeren få tryghed til selv at bevæge sig rundt på badeværelset. Det ønskes at brugeren benytter sig af sine restkræfter og de støttemuligheder der findes. Dette giver større selvstændighed, og gør at brugeren føler sig tryk i sine bevægelser.

For at reducere belastningen på plejerne, er det vigtigt at der laves en individuel vurdering af brugerens ressourcer ud fra hans/hendes synspunkt, og at dette tages op i en evt. plejeplan.

Det er ønskeligt at så mange som muligt af plejerne får denne information, og at en person tager ansvaret for at oplære de andre plejere og nyansatte. I fremtiden vil alle plejere dermed kunne udnytte badeværelset optimalt, og samtidigt vil de kunne lære brugerne at benytte badeværelset så selvstændigt som muligt

FUNKTION



Når du kommer ind på badeværelset, er der altid et støttehåndtag inden for rækkevidde. Alle støttehåndtag, toilet, vask og brusesæde er belastningstestet til at tåle store belastninger. Dette er noget som plejepersonalet bør informere brugeren om.

På brusesædet sidder man trygt da dette er indstillet i den rette højde for brugeren. Brusehylden er flytbar og kan placeres på flere af støttehåndtagene, så det altid er inden for rækkevidde. Brusestangen kan tåle samme høje belastning som støttehåndtagene, for at reducere risikoen for faldulykker.

HØJDEJUSTERING




Banos badeværelse giver mulighed for at justere højden på vasken, toiletet, støttehåndtagene ved toiletet samt brusesædet. Højdejusteringen skaber de bedste forudsætninger for at brugeren skal blive mere selvhjulpne. Toiletet kan justeres med 20 cm i højden (41 cm - 61 cm), enten manuelt med et håndtag med demenssikring, eller elektrisk.



Vasken kan justeres på samme måde som toiletet, mellem 70cm og 90 cm.



Højdejusteringen foregår individuelt sammen med brugeren. Der skal tages udgangspunkt i brugerens funktioner, højde og rækkevidde for bevægelser. Støtthåndtaget ved toiletet og brusesædet justeres manuelt med et håndtag med demenssikring.

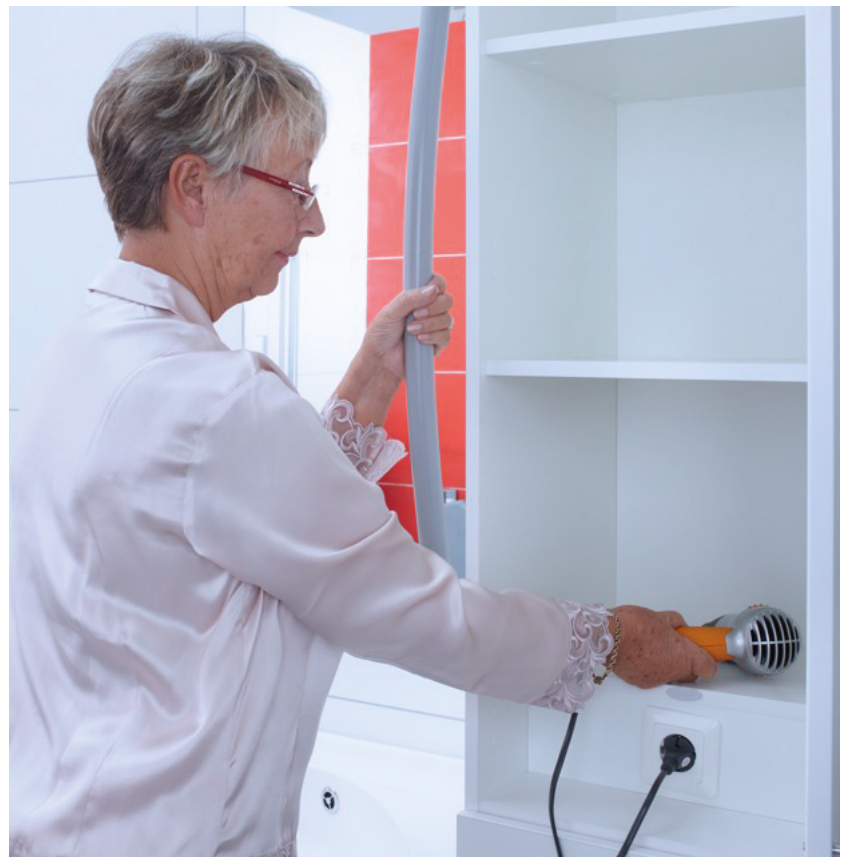

Mere information kan ses på hjemmesiden www.bano.dk